


## Colchón Nova Form Hors Standard -

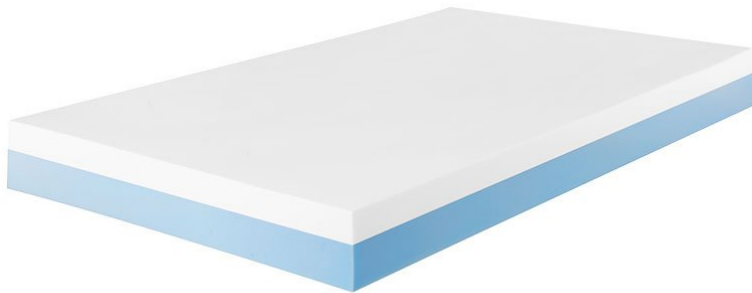

### Colchón Nova Form Hors Standard

#### Características Avanzadas para el Cuidado del Paciente

El **Colchón Nova Form Hors Standard** es una solución integral diseñada para prevenir las úlceras por presión en pacientes con un rango de riesgo medio a alto. Gracias a su diseño innovador, este soporte de cama es ideal para pacientes que permanecen en cama más de 15 horas al día y facilita enormemente el trabajo de los cuidadores.

#### Prevención Efectiva de Úlceras por Presión

Una causa de su eficacia es la inmersión corporal proporcionada por la espuma viscoelástica con memoria. Este material permite que el peso del cuerpo se distribuya sobre una superficie mayor, reduciendo los puntos de presión críticos, independientemente de la morfología del paciente. Además, este Colchón es adecuado para el tratamiento de úlceras por presión de estadio 1 a 2, gracias a su capacidad de exclusión del apoyo con sistemas de descarga localizada.

#### Máxima Durabilidad y Confort

El colchón, compuesto por una base de espuma HR de alta densidad, asegura una durabilidad excepcional y un soporte robusto a largo plazo. Además, la reversibilidad del colchón permite alternar los lados de cabeza y pies para equilibrar el desgaste y prolongar la vida útil del producto.

#### Versatilidad en Dimensiones y Materiales

Disponible en anchos desde 70 cm hasta 160 cm, el **Colchón** se adapta a una variedad de entornos y necesidades del paciente. Ofrece opciones en tres tejidos diferentes: PROMUST PU, PROMUST PU HD y PROMUST CIC, cada uno diseñado para ofrecer resistencia, comodidad y facilidad de mantenimiento.

### Especificaciones Técnicas del Colchón Nova Form Hors Standard

Características	Datos

Material de la capa superior	Espuma viscoelástica ? 75 kg/m3
Material de la base	Espuma HR ? 34 kg/m3
Reversibilidad	Colchón reversible de pies y cabeza
Anchos disponibles	70, 80, 100, 110, 120, 140, 160 cm
Funda	Disponible en funda de 3 caras Promust
Peso soportado	Paciente de 30 a 160 Kg

Opta por el **Colchón Nova Form Hors Standard** y asegura un cuidado excepcional y un confort superior para tus pacientes, mientras facilitas la labor diaria de los cuidadores. Un producto pensado para durar y ofrecer la máxima protección contra las úlceras por presión.